

01. BOOSTER PRO Guide

Znovu se ujímá vedení se zcela novým BOOSTER 6 v 1 PRO

Revoluční přístroj nabízí viditelné výsledky v oblasti rozjasnění, objemu, pružnosti, pórů a zvukové vibrace. Všech těchto aspektů péče lze dosáhnout pomocí jediného přístroje BOOSTER PRO.



Přehled hlavních režimů

Režim Radiance Booster

BOOSTER MODE

Pokyny k použití Naneste přiměřené množství přípravku a přiložte hlavici k pokožce. Krouživými pohyby jemně přejedte, aby se přípravek vsáhl.

Doporučená frekvence 1 3x denně (5-10 minut na sezení)

Režim Line MC

MC MODE

Pokyny k použití Naneste přiměřené množství přípravku a přiložte hlavici k pokožce. Postupujte od vnitřní strany obličeje k vnější hlavici držte připevněnou. Doporučená četnost 1-3krát denně (5-10 minut na jedno sezení)

Pružnost Režim Derma Shot

DERMA SHOT MODE

Pokyny k použití Naneste přiměřené množství přípravku a pomalu jej rozetřete po pokožce. V místech svalů se na 2 sekundy zastavte, aby se svaly uvolnily.

Doporučená frekvence 1-3krát denně (5-10 minut na sezení)

Póry Režim Air Shot

AIR SHOT MODE

Pokyny k použití Po vyčištění a osušení pleti jemně přejíždějte okrajem hlavice po obličeji.

Doporučená frekvence 2-3krát týdně (5 minut na sezení)

Mode Sequence

If different modes are being used on the same day, it is recommended to follow this sequence. Be sure to check the



LED INDICATION

*LED colors for each mode are preset, and LED color changes can only be made through the AGE-R app



Modrá



Oranžová



Zelená



Červ



Fialová


ená

Mode-Specific Sonic Vibration

*The Sonic Vibration can only be turned ON/OFF through the AGE-R app

Radiance Booster Mode

Vibrace jsou navrženy tak, aby napomáhaly hloubkovému vstřebávání produktů péče o pleť.

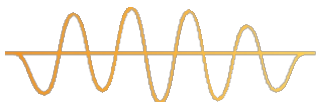

Režim Line MC

Vibrace jsou synchronizovány s pohybem zdvihu.




Elasticity Derma Shot Mode

Vibrace jsou vhodné pro péči o svaly.



Póry Režim Air Shot

Vibrace jsou určeny pro komplexní péče o póry.

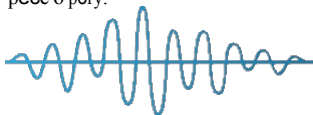

Senzor kontaktu s pokožkou



Chytrý a bezpečný kontakt s pokožkou

Funkce senzoru


Je pokročilým senzorem kontaktu s pokožkou, který rozsvítí světlo LED pouze při kontaktu s pokožkou a zaznamenává dobu kontaktu jako dobu ošetření.

02. Připojení Bluetooth

Získejte plnou kontrolu s AGE-R

Od nastavení preferovaného režimu, intenzity, hlasitosti, vibrací a barev LED až po zaznamenávání všech aspektů péče o pleť pomocí automatických zpráv. Používejte jej bez námahy a svou proměnu.

Přehled funkcí Bluetooth

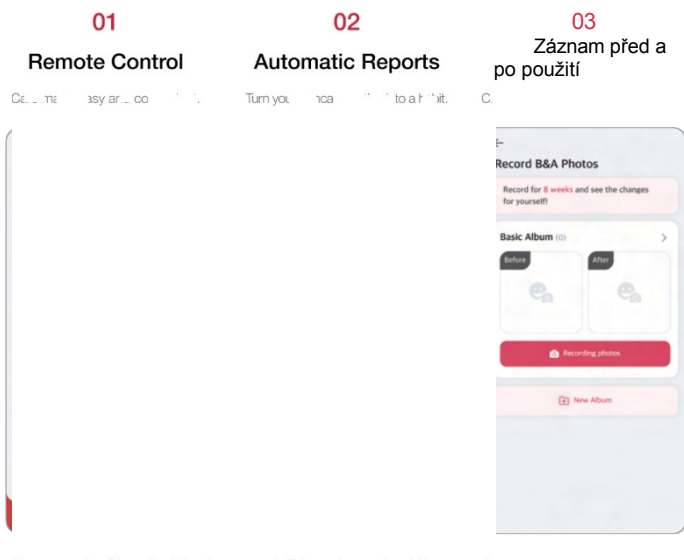

The default volume setting is at level 3, and setting it to 0 (mute) will mute all sounds effects




Využijte svůj BOOSTER PRO na maximum
Stáhněte si aplikaci AGE-R zdarma hned teď a vyzkoušejte si
AGE-R BOOSTER PRO profesionálněji a pohodlněji.

"Naskenujte kód OR nebo vyhledejte v obchodě s aplikacemi položku "AGE-R".

Pokyny pro připojení Bluetooth

'Způsobuje,,žee jee telefonm Blueo nalađenn aaBOOSTERPRO jee kk zavedení doo provozu.


01

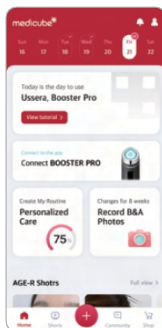


02



03

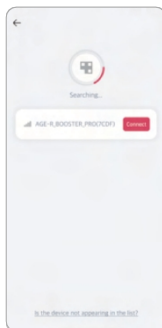

04

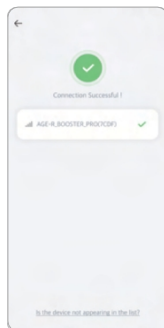

@ Vstupte do aplikace AGE-R a klikněte na "Connect BOOSTER PRO".

@ Zapněte Bluetooth na smartphonu a zapněte zařízení BOOSTER PRO. 3 Po potvrzení detekovaného zařízení klikněte na ikonu "Připojit".

@ Zkontrolujte, se správně zobrazí obrazovka "Connection Successful" (Připojení proběhlo úspěšně) a zvuk připojení Bluetooth ze zařízení BOOSTER PRO.

Bezpečnostní opatření při připojení přes Bluetooth

1.RemoteConoool

- The Remote Control feature operates only when connected

seDeVce,alnePodmínky,jakojezměnabarvení, volume control, and vibration ON/OFF are available only within the Remote Control feature after Bluetooth connection.

-filevoumeevdaa`bmmonOxCFFngspucxmguie in Remote Control will be saved as default values, but LED colorchangeswinolntesaveé

2. Automatic Reports

- Usage history when the device is used without being connected to the app is temporarily stored in the device and will automatically

3. Změny výchozí barvy LED pro režim Eaoh

[- Changing the default LED color for each mode is possible only when the device is connected and can be done in the "Settings" tab.

4. DevoeConuec#ouFalue

- Ensure that the device is not connected to another smartphone. If it is connected to another smartphone, disconnect it from the app připojeného smartphonu pomocí [BOOSTER PRO

5. Přechod na jiný telefon Smanphone



K dispozici pouze při spárování Bluetooth

- Mode-Specific Color Changes
- Sonic Vibration ON/OFF
- Volume Control
- Checking Care Reports

03. Režim Booster

Režim Booster, který Pomáhá zvýšit zářivost

BOOSTER MODE

Výchozí nastavení | Oranžová LED

Lze použít s různými typy přípravků péče o pleť a pleťových masek. Vyberte si prosím nejvhodnější metodu ze tří níže uvedených způsobů dotýkání a podle toho ji používejte.



Jak používat



Zavlažování

Přiložte hlavici k pokožce a krouživými pohyby ji převalujte, čímž dosáhnete posilujícího účinku.



Posílení

Přitiskněte hlavici k pokožce a posuňte ji po ní, jako by klouzala, čímž se dosáhne povzbuzujícího účinku.



Zaměření

Přiložte hlavici k pokožce a přitiskněte ji na jedno místo na 1-2 sekundy, než přejdete na další místo.

Bezpečnostní opatření před použitím



Zakázané
oblasti použití



Doporučené oblasti pro
nízkoúrovňové použití



Frekvence používání režimu
Booster



KROK 01

Po očištění naneste vhodný s pokožkou.



KROK 02

Ujistěte se, že je hlava v úplném kontaktu s povrchem, poté gerlymasáží a vstřebat přípravek péče o pleť.



KROK 03

Viz metoda posilování a Jakmile se přípravek péče o pleť z větší části vstřebá, pokračujte v používání, dokud se cílený kanál zcela nevstřebá. (1-3krát denně péči na požadovaných místech. / 5-10 minut na jedno použití)



KROK 04

04. Režim MC

Režim MC pro linku Objemová péče

MC MODE

Výchozí nastavení| Zelená LED dioda

Používejte po nanesení přípravku péče o pleť.

Pokud máte pocit, že je stimulace příliš slabá,
upravte množství přípravku péče o pleť.



Jak používat



LINING

Přiložte hlavici k pokožce a použijte ji pohybem směrem nahoru.

Posílení účinků režimu MC

Začněte prosím s režimem MC, který pomáhá zvětšit objem jemných a hlubších vrásek.

Poté přepněte na režim Derma Shot, který masíruje svaly pro pružnější a omlazenou pleť.

MC MODE



DERMA SHOT MODE

Doporučuje se používat v tomto pořadí

Bezpečnostní opatření před použitím



Zakázané
oblasti použití



Doporučené oblasti pro
nízkourovňové
použití



Frekvence používání režimu
MC



Po očištění naneste vhodný
kontaktu s pokožkou.
hlavicí



Ujistěte se, že je hlava v úplném s povrchem pokožky a poté pohybujte hlavu směrem od vnitřní strany obličeje k vnější straně pohybem vzhůru.



Pro oblast krku a čela použijte
nebo ještě jednou zespod nahoru: ^{neco-amended pro použití}



Po nanesení přípravku péče o pleť
většinou vstřebá, dokončete ošetřením
péče o požadované oblasti.


05. Režim Derma Shot

Režim Derma Shot pro péči o pružnost

DERMA SHOT MODE

Výchozí nastavení | Červená LED dioda

Po nanesení přípravku péče o pleť masírujte oblast, kde nejlépe působí stimulace svalů. Při jeho používání můžete přímo pozorovat pohyb svalů.

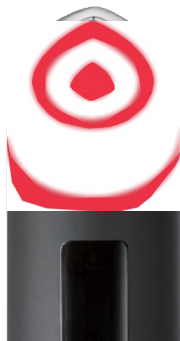

Jak používat



Zaměření

Pomalou pohybujte hlavou v úplném kontaktu kůží. V místech, kde svalová stimulace působí nejlépe, se na 1-2 vteřiny zastavte, aby se svaly uvolnily.

Zvýšení účinků režimu Derma Shot

Začněte s režimem MC, který pomáhá zvětšit objem jemných hlubších vrásek. Poté přepněte na režim Derma Shot, který stimuluje svaly pro pružnější a omlazenou pleť.

MC MODE

DERMA SHOT MODE

Doporučuje se používat v tomto pořadí.

Bezpečnostní opatření před použitím



Zakázané
oblasti použití



Doporučené oblasti pro
nízkoúrovňové použití



Frekvence používání režimu
Derma Shot



KROK 01

Po očištění naneste vhodný
naneste na pokožku množství pečujícího přípravku.
pohybuje a na 1-2 sekundy přerušte.



KROK 02

s hlavou v plném kontaktu s pokožkou,
před použitím se pomalu
místech, kde cítíte největší stimulaci,
uvolnění svalů.



KROK 03

Jemně masírujte od linie krku směrem k
oblast trapézů a linii klíční kosti.
nebo přepětí.
reco+amended pro použití na nízké
úrovni



KROK 04

Použití: 5-10 minut denně pro péči o
pružnější obličej.
usage method.

06. Režim Air Shot

Režim Air Shot pro péči o póry

AIR SHOT MODE

Výchozí nastavení | Modrá LED dioda

Po vyčištění ji nezapomeňte použít na suchou pokožku a lehce ji přejet okrajem hlavice. Při použití na mokré pokožce nebude správně přenášet stimulaci.



Jak používat



SWEEPING

Jemně se dotýkejte kůže okrajem hlavy a. zametat v jednom směru.



Pro rozsáhlé oblasti

Při použití na rozsáhlých plochách zametejte okrajem.



Pro menší oblasti

Pro lokalizované oblasti, jako je nos, brada a mezprstí.

eyebrows, gently sweep it with tip.

Bezpečnostní opatření před použitím

* Při prvním použití výrobku začněte s nejnižší sadou.



**Zakázané
Air Shot**

Nepoužívejte na uvulární oblast, otevřenou

zátky.
operace byly provedeny.
dny po každém uss.



**Doporučené oblasti
pro použití na nízké úrovni**

Doporučujeme používat ji onu denně, na rány nebo na místa, kde se provádějí
očí, nosu a oblasti úst, je vhodné 2-3krát týdně a užívání a nebo
Doporučuje se používat v nízkém množství. Přestávku 1 nebo 2-3



**Oblasti použití režimu
Air Shot**

Pro citlivé oblasti, jako je např.



KROK 01

Používejte jej na zcela suchou pleť po vyčištění.


*Nefunguje
mokrě.

pokud je kůže



KROK 02

Jemně se dotýkejte pokožky hranou hlavice a přejíždějte s ní jedním směrem.

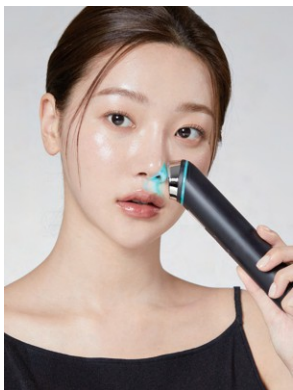

KROK 03

Pro lOcalized oblasti, jako je nos, brada, Po 5 minutách používání použijte Booster a mezi obočím, jemně Mode absorbovat produkt péče o pleť přejeděte špičkou. pro zářivou pleť.



KROK 04

07. Podrobné informace o produktu

Přehled obrazovky LCD



Výchozí obrazovka

@ Indikátor Bluetooth



Odpojení Bluetooth



Připojení Bluetooth
(-interatea se speciální aplikací AsE-R)

@ Indikátor baterie



Zbývající baterie




Vybitá baterie
(Resuies chareine)

@ Aktuální režim použití @

Úroveň intenzity

Čas péče

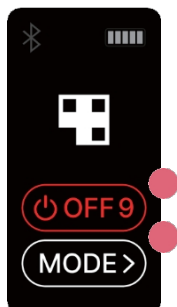

Obrazovka při čekání na změnu režimu po pětiminutové péči

@ Odpočítávání automatického vypnutí



Pokud není žádná operace s tlačítkem, po 10 sekundách se automaticky vypne.

@ Další pokyny k péči

Tlačítko MODE a ovládání aplikace lze použít k přepnutí do jiného režimu.



Obrazovka nabíjení/slabé baterie

@ Nabíjecí obrazovka

Displayel v zelené barvě, což vám umožní zkontrolovat stav nabíjení.

(*Nefunguje během nabíjení)

@ Obrazovka slabé baterie

Zobrazuje se červeně, když baterie vybitá, což znamená, že je nutné ji nabít.

@ Plně nabitá obrazovka



Celý prstenec se zobrazí zeleně.